



PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Klas van Gebruik	B
Maximal draaggewicht	136 kg (300 lbs.) 54,43 kg (120 lbs.) met pediatrische optie
Max. Snelheid ¹	Tot 9,9 km/h (6,2 mph) Tot 12,87 km/h (8 mph), met hoge snelheid motoren (optioneel)
Bodemvrijheid ²	89 mm (3,5 in.) bij motoren 76 mm (3 in.) op basisframe 64 mm (2,5 in.) op caster punt
Draaicirkel ²	502 mm (19,75 in.)
Totale afmeting ^{2, 6}	Lengte: 1128 mm (44,4 in.) met tuigage vooran 904 mm (35,6 in.) zonder tuigage vooran Breedte: 667 mm (26,25 in.)
Aandrijfwielen	356 mm (14 in.), massieve (facultatief); luchtabanden (facultatief); run flat (standaard)
Zwenkwielen	Voorkant: 153 mm (6 in.) solide Achterkant: 153 mm (6 in.) solide
Vering	ATX-orphaning (Active-Trac® met extra stabiliteit)
Bereik ^{1, 4}	Tot 33,8 km (21 miles) Tot 32,2 km (20 miles) met hoge snelheid motoren (optioneel) Tot 29 km (18.01 miles) met Gemeenschappelijk Gebruik pakket (optioneel)
Gewicht per eenheid ⁵	Basis: 65 kg (143,5 lbs) Batterijen: Groep 24: 23,6 kg (52 lbs.) elke
Aandrijving	Met twee motoren, mid-wheel-6® drive
Remsysteem	"Intelligent remsysteem" elektronisch aangedreven, schijf parkeerrem
Accu's ³	Twee, 12-volt, diep laad, Groep 24 batterijen
Batterij lader	8-amp, weg van rolstoel
Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
Bedieningskracht van aadrijfbesturing	Minder dan 5 N
Maximaal toegestane helling	10,5% (6°)
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Aflopend)	Tot 78,74 mm (3,1 in)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.

² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.

³ AGM- of gelceltype vereist. Zie "Batterijen en opladen".

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.

⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.



LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

Rev B/March 2018




Q6 Edge[®] z

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

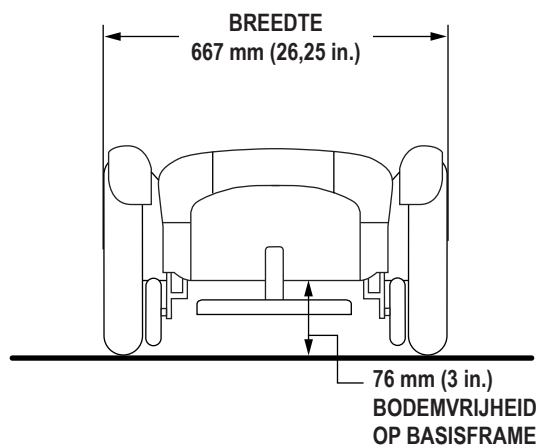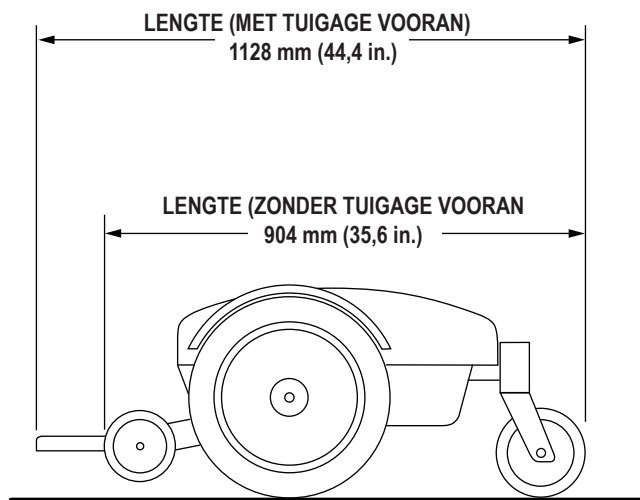

DRAAICIRKEL

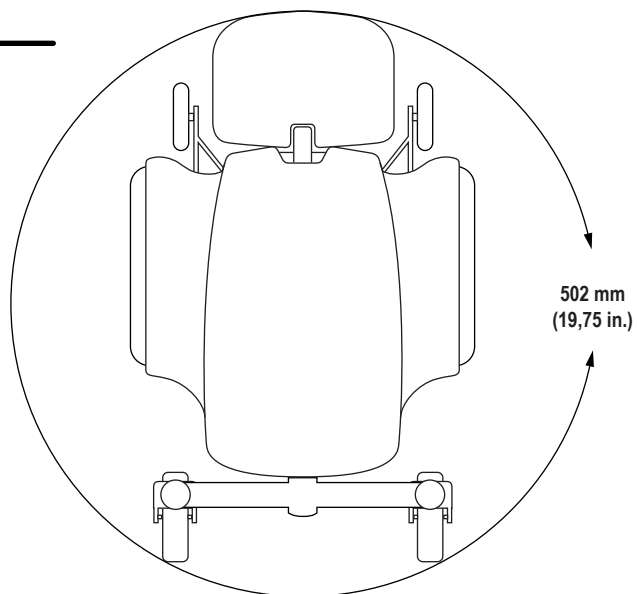

Rev B/March 2018

