

Q4



Met functies zoals een TB-Flex zitsysteem, Mid-Wheel 6 Drive en ATX vering, is de Q4 ontworpen voor actieve gebruikers. De Q4 levert uitzonderlijk vermogen en prestaties tegen een uitstekende prijs.



QUANTUM®

#1 FOR REHAB POWER



| quantumrehab.eu

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	14" luchtbanden of massief
ZWENKWIELEN	6" massief
MAXIMUM SNELHEID ¹	Tot 10 km/u
BODEMVRIJHEID ²	63 mm
DRAAICIRKEL ²	508 mm
LENGTE ^{2, 6}	901 mm
BREEDTE ^{2, 6}	610 mm
ZITSYSTEEM MATEN	
TB-Flex	Breedte: 380 mm - 560 mm Diepte: 380 mm - 510 mm
HANDMATIG LIFTEN / KANTELEN	Ja
ACCUGROOTTE ³	NF-22 (55 AH)
ACCU GEWICHT ⁵	17,2 kg per stuk
BESTURINGSSYSTEEM	90A PG VR2 controller 100A Q-Logic 2 EX controller
ACCULADER	5A of 8A extern
AANDRIJVING	4-Pole Mid-Wheel 6
BELADINGSCAPACITEIT ⁴	113 kg (met aanpasbare rug) 136 kg (met aanpasbare rugleuning)
GEWICHT BASIS ⁵	62 kg

Kenmerken


- Mid-Wheel 6 bied zes wielen op de grond voor maximale stabiliteit
- Low impact OMNI-wielen (nylon, bolvormige zwenkwieken) aan de voor- en achterzijde voorkomen het blokkeren van wielen
- ATX-vering (Active-Trac met extra stabiliteit) bevat OMNI-wielen voor betere prestaties op afwisselend terrein

Opties

- Statische kanteling
- Elektrische kanteling
- TB-Flex sling zitsysteem
- TB-Flex comfort zitsysteem
- Hoofdsteun
- LED verlichting
- Handmatige kanteling
- PG VR2 controller

Kleuren*

* Zie website voor alle kleuropties

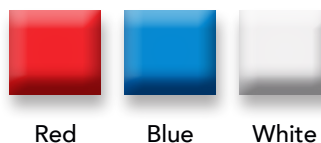

1. Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accu-toestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.
2. Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ of -) 3%.
3. AGM- of gelceltype vereist.
4. Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
5. Gewicht van de batterij kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.
6. De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle accu's hangen af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, de gesteldheid van de accu en de bandendruk.



Pride Mobility Products BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039
quantumrehab.nl • info@prideeurope.nl



NL-SSQ0003/REVA/01DEC2020